



# ANLEITUNG FÜR SCHNELLE ANWENDUNG




CE 2797

Angeschlossenes Gerät Oximeter &  
Sensor für Herz- und Atemfrequenz

## Beschreibung und Positionierung des Geräts Bora band® am Arm oder am Handgelenk

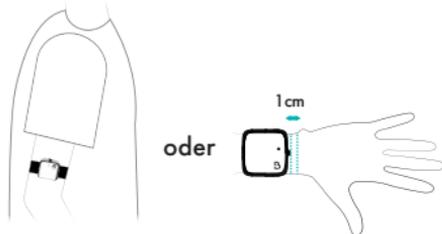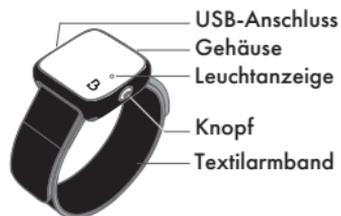

Das Gerät Bora band® BB100 muss gut angepasst werden, sodass es ohne Unbehagen leichten Druck auf Ihre Haut ausübt. Dies gewährleistet die Genauigkeit der Messwerte.

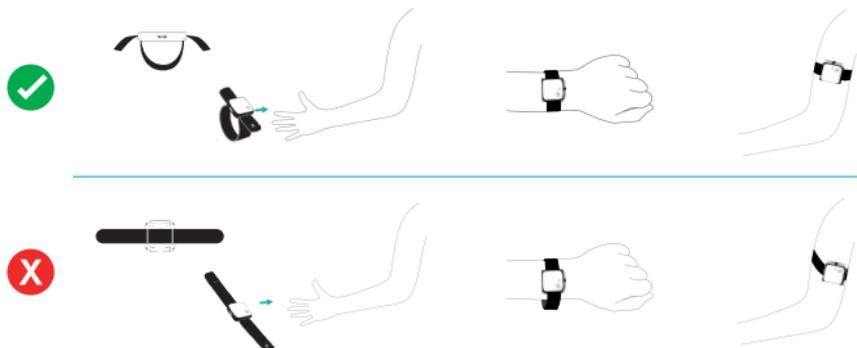

### Bewährte Praktiken

- Tragen Sie Ihr Gerät Bora band® **so oft wie möglich**, auch nachts.
- Nutzen Sie die Zeit der Körperpflege, um Ihr **Gerät Bora band® täglich zu laden**.
- Das Gerät Bora band® ist nur gegen Spritzwasser aus allen Richtungen beständig (IP64), ist es ratsam, **es während des Toilettengangs** oder bei Wassersportarten wie Schwimmen **abzunehmen**.
- Um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten und Probleme bei der Datenübertragung zu vermeiden, **sollten Sie das Bora band® - Gerät niemals ausschalten, wenn eine Telemonitoring-Sitzung im Gange ist**.

Mithilfe der mobilen App können Sie täglich überprüfen, **ob Ihr Gerät eine Verbindung hergestellt hat**, um Ihre Daten zu übermitteln.

### Das Gerät Bora band® starten oder seinen Betrieb überprüfen

Drücken Sie kurz den Knopf : Während des Einschaltens des Geräts Bora band® blinkt die Leuchtanzeige grün. 

Wenn Sie nach dem Einschalten kurz den Knopf drücken, zeigt das durchgehende Aufleuchten einer grünen Leuchtanzeige  dass das Gerät Bora band® in Betrieb ist.

### Das Gerät Bora band® ausschalten

Drücken Sie den Knopf, bis die orangefarbene Leuchtanzeige erscheint und damit anzeigt  dass Ihr Gerät Bora band® BB100 ausgeschaltet wird.

### Weitere Leuchtanzeigen

	Orange blinkend: Niedriger Akkustand, laden Sie Ihr Gerät Bora Band® BB100 mit dem mitgelieferten Ladekabel*.
	Weiß blinkend: Der Akku lädt. Während dem Ladevorgang wird die Leuchtanzeige ausgeschaltet, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.
	Durchgehend blau: Das Gerät Bora band® installiert ein Software-Update, sendet oder empfängt Daten. Schalten Sie das Gerät während dieses Vorgangs bitte nicht aus.*
	Durchgehend rot: In Ihrem Gerät Bora band® BB100 ist ein Fehler aufgetreten. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Schalten Sie es aus, und starten Sie es neu.</li><li>▶ Wenn der Fehler weiter besteht : Nehmen Sie mit der Struktur Kontakt auf, die Ihnen das Gerät Bora band® BB100 ausgeliefert hat.</li></ul>

\*Die Leuchtanzeige leuchtet nachts zwischen 20:00 UTC und 6:00 UTC nicht auf.

Weitere Informationen finden Sie in der  
Gebrauchsanleitung des Geräts Bora band®.



**Hersteller :**



BIOSENCY  
13 rue Claude Chappe Bât A Oxygène  
35510 Cesson Sévigné, France  
[www.biosency.com](http://www.biosency.com)