



# ISTRUZIONI RAPIDE PER L'USO




CE 2797

Dispositivo connesso Ossimetro & rilevatore  
di frequenza cardiaca e respiratoria

## Descrizione e posizionamento del dispositivo Bora band® sul braccio o sul polso

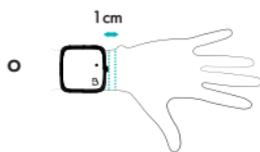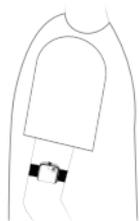

Il dispositivo Bora band® BB100 deve essere regolato in modo che eserciti una leggera pressione sulla pelle, ma senza causare disagio. Questo garantisce la precisione delle misure.

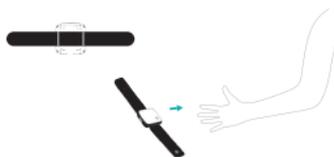

### Consigli d'uso

- Indossare il dispositivo Bora band® **con il più spesso possibile**, anche di notte.
- Approfittare del tempo della toilette per **ricaricare il dispositivo Bora band® quotidianamente**.
- Il dispositivo Bora band® è resistente solo agli spruzzi d'acqua in tutte le direzioni (IP64), quindi si consiglia di **rimuoverlo quando ci si lava** o durante le attività acquatiche come il **nuoto**.
- Per garantire il corretto funzionamento ed evitare problemi di trasmissione dei dati, si consiglia di **non spegnere mai il dispositivo Bora band® quando è in corso una sessione di telesorveglianza**.

Con l'applicazione mobile, verificare ogni giorno che **il dispositivo sia correttamente connesso** per il trasferimento dei dati.

### Per avviare o verificare il funzionamento del dispositivo Bora band®

Premere rapidamente il pulsante : la spia lampeggia in verde  durante l'accensione.

Premere rapidamente il pulsante dopo l'accensione permette di visualizzare una spia verde fissa  che indica che il dispositivo Bora band® è in funzione.

### Per spegnere il dispositivo Bora band®

Premere il pulsante finché non appare la spia arancione  che indica che il dispositivo Bora band® BB100 è spento.

### Altre spie

	Arancione lampeggiante: la batteria è quasi scarica, ricaricare il dispositivo Bora band® BB100 con l'apposito caricabatterie*.
	Bianca lampeggiante: la batteria si sta ricaricando. La spia si spegne quando la batteria è completamente ricaricata.
	Blu fisso: Il dispositivo Bora band® sta installando un aggiornamento software, inviando o ricevendo dati. Non spegnerlo durante questa operazione*.
	Rosso fisso: il dispositivo Bora band® BB100 non funziona correttamente. ▶ Provare a spegnerlo e a riaccenderlo. ▶ Se il problema persiste: contattare la struttura che ha fornito il dispositivo Bora band® BB100.

\*L'indicatore luminoso non si accende di notte tra le 20:00 UTC e le 6:00 UTC.

Per ulteriori informazioni, vedere il manuale d'uso del dispositivo Bora band®.



**Produttore :**



BIOSENCY  
13 rue Claude Chappe Bât A Oxygène  
35510 Cesson Sévigné, France  
[www.biosency.com](http://www.biosency.com)