
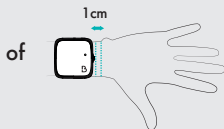
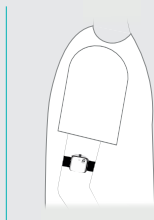


SNELLE GEBRUIKSAANWIJZING

Beschrijving en plaatsing van het apparaat Bora band® op de arm of pols

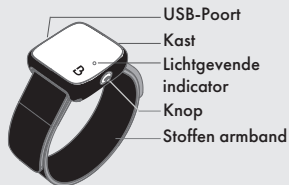


Het apparaat Bora band® BB100 moet goed worden afgesteld en lichte druk uitoefenen op uw huid, zonder enig ongemak te voelen. Dit garandeert nauwkeurige metingen.


Goede praktijken

- Draag het apparaat Bora band® **zo vaak mogelijk**, ook 's nachts.
- Profiteer ervan om tijdens het wassen het apparaat **Bora band® dagelijks op te laden**.
- Het apparaat Bora band® is alleen bestand tegen spatwater in alle richtingen (IP64), dus het is raadzaam om **hem af te doen bij het afwassen** of tijdens wateractiviteiten zoals **zwemmen**.


Gebruik de mobiele applicatie om elke dag **te controleren of je apparaat goed is aangesloten om je gegevens terug te sturen.**

Om te starten of het functioneren van het apparaat Bora band® te controleren


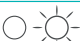


Druk snel op de knop : het indicatielampje knippert groen  tijdens inschakeling van het apparaat Bora band®.

Wanneer de knop snel wordt ingedrukt na het inschakelen, blijft het indicatorlampje groen branden  dit betekent dat het apparaat Bora band® in werking is.

Het apparaat Bora band® stoppen

Druk op de knop totdat het oranje indicatielampje verschijnt  dit betekent dat het apparaat Bora band® BB100 uitschakelt.

Andere indicatorlampjes

	Oranje knippert : de batterij is bijna leeg, laadt het apparaat Bora band® BB100 op met behulp van de bijgeleverde oplader*.
	Wit knippert : de batterij wordt opgeladen. Tijdens het opladen gaat het lichtje uit als de batterij volledig is opgeladen.
	Constant blauw : Het apparaat Bora band® installeert een software update, verstuurt of ontvangt data, niet uitschakelen tijdens deze operatie*.
	Constant rood: het apparaat Bora band® BB100 functioneert niet. ▶ Probeer hem uit te zetten en opnieuw te starten. ▶ Als het nog niet functioneert: neem contact op met de structuur die het apparaat Bora band® BB100 geleverd heeft.

*De lichtindicator gaat 's nachts niet aan tussen 20:00 UTC en 6:00 UTC.

Fabrikant :



BIOSENCY
13 rue Claude Chappe Bât A Oxygène
35510 Cesson Sévigné, France
www.biosency.com

Voor meer informatie kunt u de
gebruiksaanwijzing van het
apparaat Bora band®
raadplegen.



Versie 7.0-NL

December 2024