
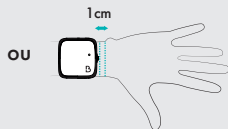


Dispositivo conectado Oxímetro e sensor de frequência cardíaca e respiratória

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA

Descrição e posicionamento do dispositivo Bora band® no braço ou no pulso

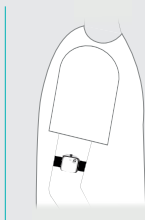


O dispositivo Bora band® BB100 deve ser devidamente ajustada e aplicar uma ligeira pressão sobre a sua pele, sem sentir desconforto. Garante, assim, a exatidão das medições.


Boas práticas

- Use o seu dispositivo Bora band® **com a maior frequência possível**, incluindo durante a noite.
- Desfrute do momento da higiene para **recarregar o seu dispositivo Bora band® diariamente**.
- O dispositivo Bora band® só é resistente a salpicos de água em todas as direcções (IP64), pelo que é aconselhável **retirá-la ao lavar-se** ou durante a prática de desportos aquáticos, como a **natação**.


Graças à aplicação móvel, verifique diariamente que a seu **dispositivo está devidamente ligado** para comunicação os seus dados.

Para iniciar ou verificar o funcionamento do dispositivo Bora band®


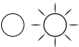


Prima rapidamente o botão : a luz indicadora pisca a verde  quando o dispositivo Bora band® está a ligar.

Quando o botão é premido rapidamente após a ligação, uma luz indicadora verde constante  indica que o dispositivo Bora band® está em funcionamento.

Para parar o dispositivo Bora band®

Prima o botão até aparecer a luz indicadora laranja  indicando que o dispositivo Bora band® BB 100 está desligado.

Outros sinais luminosos

	Laranja intermitente : a bateria está fraca, recarregue o seu dispositivo Bora Band® BB 100 com a ajuda do carregador fornecido*.
	Branco intermitente : a bateria está a carregar. Durante a carga, o indicador apaga-se depois de a bateria estar completamente carregada.
	Azul constante : o dispositivo Bora band® está a instalar uma atualização de software, a enviar ou receber dados; não desligue durante esta operação*.
	Vermelho fixo : o seu dispositivo Bora band® BB 100 apresenta uma anomalia. <ul style="list-style-type: none">▶ Tente desligar e voltar a ligar.▶ Se a anomalia persistir: contacte a estrutura que lhe forneceu o dispositivo Bora band® BB 100.

*O indicador luminoso não se acende durante a noite entre as 20:00 UTC e as 6:00 UTC.

Fabricante :



BIOENCY

13 rue Claude Chappe Bât A Oxygène
35510 Cesson Sévigné, France
www.bioency.com

Para mais informações, consulte o manual de utilização do dispositivo Bora band®.



Dezembro 2024

Versão 7.0-PT